



EQUIPO DE EXPANSIÓN LINEAL DE PRECISIÓN

2095


Equipo de expansión lineal de precisión

El equipo Optika de expansión lineal es fácil de usar y muy robusto gracias a su base de aluminio. Gran facilidad de lectura utilizando el calibrador-medidor de marcación, proporcionado de 0-10 mm, 0.01 mm.

El equipo de expansión lineal de precisión está provisto de dos barras metálicas huecas de diferentes materiales que se calientan pasando vapor a través de ellas.

La expansión lineal de los diferentes metales se mide usando un calibrador- medidor de marcación, la temperatura se mide usando un termómetro en contacto con la varilla.

De esta forma obtenemos toda la información necesaria para calcular el coeficiente de dilatación térmica lineal.

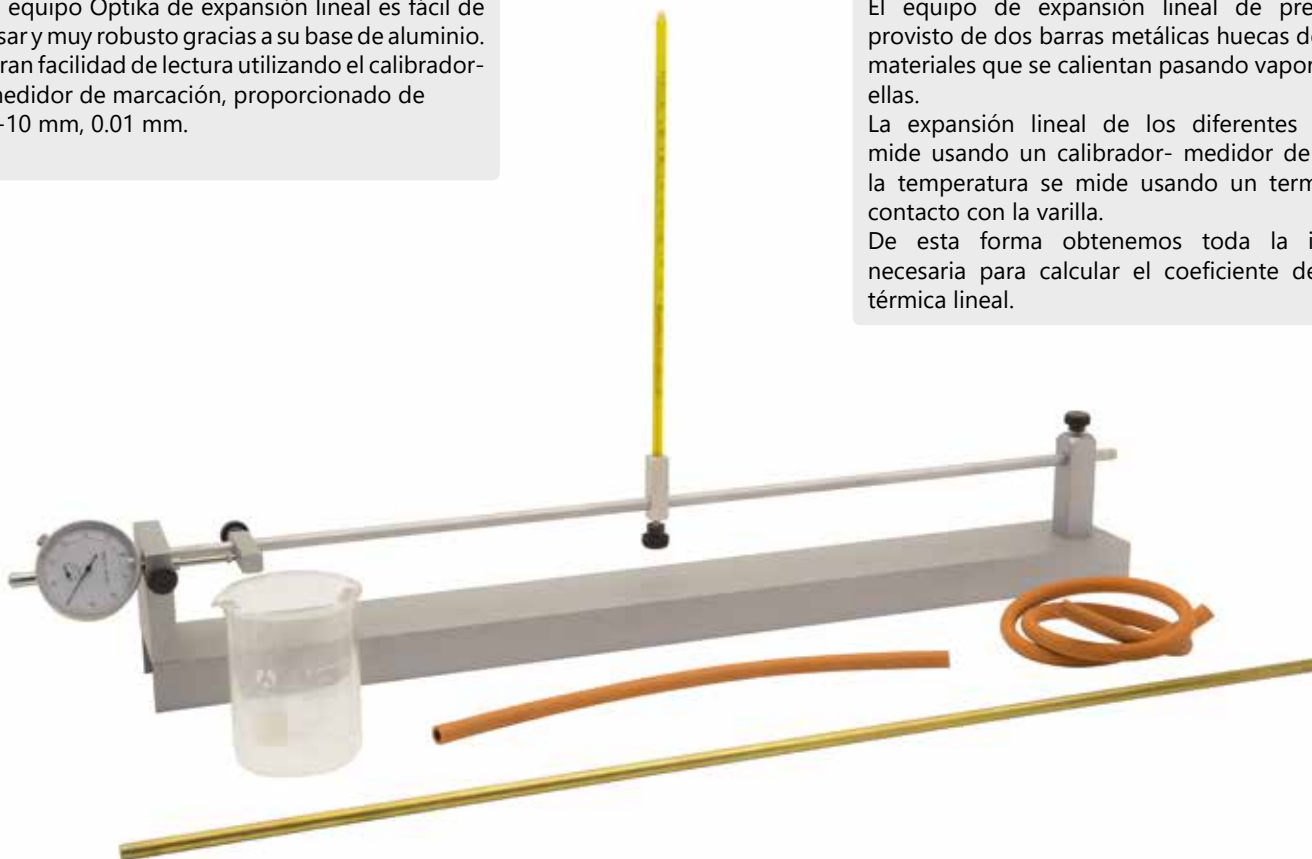

Material suministrado

- Base con soporte (700 x 70 mm)
- Varilla de aluminio 700 mm
- Barra de latón 700 mm
- Medidor de marcación - calibrador
- Termómetro

Material necesario no proporcionado

- Kit generador de vapor:
- Placa calefactora
 - Tapón de caucho
 - Matraz de filtración - kitasatos

